

Gebruiksvriendelijke skin stapler en remover voor een betrouwbare en snelle wondsluiting.


# Leukosan SkinStapler® Leukosan StapleRemover®



De Leukosan SkinStapler en StapleRemover zijn snel en makkelijk in het gebruik, terwijl een goed en betrouwbaar resultaat wordt gewaarborgd. De Leukosan SkinStapler is daarmee een zeer effectieve en efficiënte methode van wondsluiting.

## EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

De Leukosan SkinStapler is zeer eenvoudig en comfortabel in het gebruik. Het ergonomische design van de Stapler en het anti-slip-materiaal geven een vaste grip tijdens het gebruik. Bovendien is de Stapler zo ontworpen dat er goed zicht is op het te sluiten gebied (vanuit normale positie tijdens het gebruik). Hierdoor kunnen de nietjes nog beter gepositioneerd worden. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de Stapler deels doorzichtig is. Met behulp van de indicator kan tijdens het sluiten snel afgelezen worden hoeveel nietjes er nog voorradig zijn.

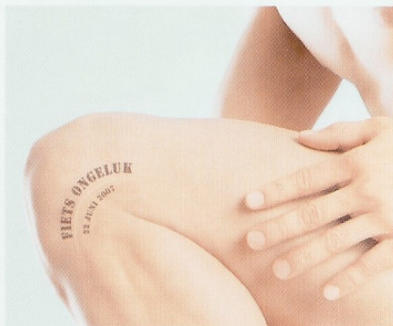

De Leukosan SkinStapler waarborgt een zeer goed en betrouwbaar resultaat. Het gepatenteerde automatische niet-mechanisme werkt snel en nauwkeurig en voorkomt dat er meer dan één nietje tegelijkertijd vrijkomt. De Stapler is gevuld met 35 D-vormige nietjes. Deze nietjes geven ruimte voor

## ASSORTIMENT

Omschrijving	Artikelnr.	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton	Z-index nummer	Memo-code
Leukosan SkinStapler	72614-00	5	4	15344924	LEUKX3
Leukosan StapleRemover	72615-00	10	4	15344932	LEUKX

oedeemvorming, waardoor geen insnoering van de wondranden optreedt. Hierdoor wordt een mooi cosmetisch resultaat verkregen en littekenvorming wordt tot een minimum gereduceerd.

De Leukosan SkinStapler is steriel verpakt en geschikt voor eenmalig gebruik.

## REMOVER

De nietjes zijn gemakkelijk te verwijderen met de Leukosan StapleRemover. Met de Leukosan StapleRemover kunnen alle soorten nietjes worden verwijderd. Wanneer de nietjes verwijderd moeten worden, is afhankelijk van het

type wond, de locatie van de wond en van persoonlijke factoren zoals huidtype en ander onderliggend lijden.

## TOEPASSINGEN

Wondsluiting na kleine, middelgrote en grote incisies en snijwonden binnen vele disciplines: OK, spoedeisende hulp, polikliniek, huisartsenpraktijk, dierenartspraktijk, etc.

## CONTRA-INDICATIES

Het gebruik van de Leukosan SkinStapler wordt ontraden, wanneer de afstand van de nietjes en bloedvaten, botten en/of interne organen minder dan 5mm is.

